Use Case: Прохождение адаптивного опроса для оценки тревожности


Идентификация Use Case

Параметр	Значение
ID	UC-001
Название	Прохождение адаптивного опроса для оценки тревожности

Акторы

Актор	Роль	Описание	Ответственность
Пользователь	Первичный	Человек,	Отвечает на вопросы опроса,
		испытывающий	предоставляет информацию о
		тревожность	симптомах
AI-ассистент	Первичный	Система	Анализирует ответы,
		искусственного	адаптирует вопросы,
		интеллекта	рассчитывает результаты
Психотерапевт	Вторичный	Медицинский	Валидирует результаты,
		специалист	предоставляет
			профессиональную оценку
Система	Вторичный	Техническая система	Отслеживает качество работы,
мониторинга			фиксирует ошибки
Администратор	Вторичный	Технический	Управляет настройками
		администратор	системы, обновляет алгоритмы

Система адаптивного опроса для оценки тревожности

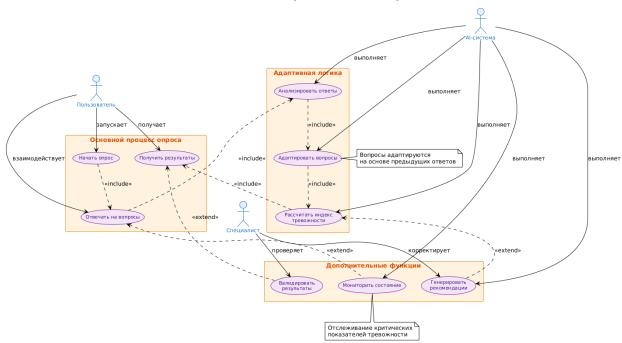

Краткое описание

Пользователь проходит персонализированный опрос, который адаптируется под его ответы при помощи AI-ассистента для получения точной оценки уровня тревожности с возможностью валидации результатов специалистом.

Предусловия

Условие	Описание	Ответственный
Регистрация	Пользователь имеет активную учетную	Пользователь
пользователя	запись	
Доступность AI-	Система ИИ функционирует корректно	Администратор
модели		
Актуальная база	Загружены современные	Психотерапевт,
знаний	психометрические инструменты	Администратор
Работа	Системы отслеживания	Система мониторинга
мониторинга	функционируют	

Постусловия

Результат	Описание	Получатель
Профиль	Персонализированная оценка	Пользователь
тревожности	состояния	
Индекс	Численный показатель (0-100)	Пользователь,
тревожности		Психотерапевт
Рекомендации	Персонализированные советы по	Пользователь
	самопомощи	
Данные для	Сохраненные результаты опроса	АІ-ассистент,
анализа		Психотерапевт
Метрики качества	Показатели работы системы	Система мониторинга

Основной сценарий

Шаг	Актор	Действие	Результат
1	Пользователь	Запускает оценку тревожности	Система активирована
2	AI-ассистент	Отображает инструкции и	Интерфейс готов
		первый вопрос	
3	Пользователь	Отвечает на базовые вопросы (5	Данные собраны
		шт.)	
4	AI-ассистент	Анализирует ответы в реальном	Определен уровень
		времени	тревожности
5	AI-ассистент	Выбирает адаптированные	Персонализированный
		вопросы	набор вопросов
6	Пользователь	Отвечает на	Детальные данные
		специализированные вопросы	получены
7	AI-ассистент	Рассчитывает итоговый индекс	Численная оценка готова
		тревожности	
8	Система	Фиксирует метрики сессии	Данные для улучшения
	мониторинга		сохранены
9	AI-ассистент	Генерирует	Рекомендации созданы
		персонализированные	
		рекомендации	
10	Пользователь	Просматривает результаты	Получена обратная связь

Альтернативные сценарии

А1. Прерывание опроса

	Шаг	Актор	Действие	Результат
--	-----	-------	----------	-----------

A1.1	Пользователь	Прерывает процесс опроса	Сессия остановлена
A1.2	AI-ассистент	Предлагает сохранить прогресс	Диалог сохранения
A1.3	Пользователь	Подтверждает/отклоняет сохранение	Решение принято
A1.4	AI-ассистент	Сохраняет частичные данные	Прогресс зафиксирован

А2. Обнаружение критического состояния

Шаг	Актор	Действие	Результат
A2.1	AI-ассистент	Обнаруживает суицидальные	Критическое состояние
		мысли	выявлено
A2.2	AI-ассистент	Активирует экстренный	Безопасный режим
		протокол	включен
A2.3	Система	Уведомляет дежурного	Специалист оповещен
	мониторинга	специалиста	
A2.4	Пользователь	Видит экстренные контакты	Помощь доступна

А3. Валидация результатов

Шаг	Актор	Действие	Результат
A3.1	AI-ассистент	Передает результаты для проверки	Данные отправлены
A3.2	Психотерапевт	Анализирует результаты оценки	Профессиональная
			оценка
A3.3	Психотерапевт	Подтверждает/корректирует	Валидация завершена
		результаты	
A3.4	AI-ассистент	Обновляет рекомендации	Скорректированные
			советы

Исключительные ситуации

Исключение	Причина	Ответственный	Действие
Технический	Недоступность АІ-	Администратор	Переключение на базовый
сбой	модели		опросник
Отказ	Дискомфорт от	Пользователь	Предложение
пользователя	вопросов		альтернативных
			формулировок
Перегрузка	Высокая нагрузка	Система	Постановка в очередь
системы		мониторинга	
Некорректные	Противоречивые	AI-ассистент	Запрос уточняющих
данные	ответы		вопросов

Бизнес-правила

Правило	Описание	Ответственный
Максимум 25 вопросов	Ограничение для	AI-ассистент
	предотвращения усталости	
Минимальная достоверность 70%	Критерий для выдачи	AI-ассистент
	рекомендаций	
Обязательная валидация при	Результаты >80 баллов требуют	Психотерапевт
высоком риске	проверки	
Конфиденциальность данных	Соблюдение медицинской	Все акторы
	тайны	

Критерии приемки

Критерий	Ожидаемое значение	Метрика
Точность оценки	>85%	Сравнение с оценками специалистов
Время прохождения	8-15 минут	Среднее время сессии
Завершаемость	>90%	Процент завершенных опросов
Удовлетворенность	>4/5	Оценка пользователей
Безопасность	100%	Обнаружение критических состояний